



## Graviditetstest Ultratidigt

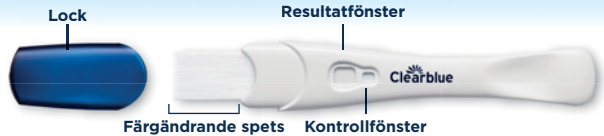

För självtestning. Läs bruksanvisningen noga innan du testar.

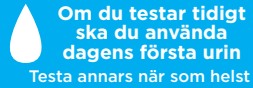

## 1 Gör testet

Ta bort folien, ta av locket och använd omedelbart.  
Placera den färgändrande spetsen:

**VIKTIGT:** sänk ned spetsen  
helt som visas



eller



**VIKTIGT:** Den färgändrande spetsen blir omedelbart rosa, vilket innebär att urin absorberas.  
**Börja tidtagning så snart du ser att den färgändrande spetsen blir rosa.**  
Sätt på locket igen och lägg teststicken på en plan yta. Om spetsen inte blir helt rosa, se "Testfel".

## 2 Vänta



En linje i kontrollfönstret kan börja visas snabbt men du måste  
**VÄNTA 3 HELA MINUTER** innan du läser av ditt resultat.  
Om inga blå linjer visas, se "Testfel".

## 3 Resultat

**Gravid - Kontakta din läkare om ditt resultat är Gravid.**



**Inte gravid (se F2).**



Om du är osäker på ditt resultat, se F6.

**OM DU SER TVÅ LINJER BETYDER DET ATT DU ÄR GRAVID. DET HAR INGEN BETYDELSE HUR LJUSA ELLER MÖRKA LINJERNA ÄR.** En blå linje måste finnas i kontrollfönstret för att ditt resultat ska vara giltigt. Om inte, se "Testfel". **VIKTIGT!** Läs av ditt resultat inom **10 minuter** efter testning. Bortse från eventuella förändringar efter denna tidpunkt.

# Frågor och svar

## 1 Mitt resultat är Gravid. Vad ska jag göra?

Kontakta din läkare som kan ge dig råd om vilka steg du ska ta närmast. Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få veta att du inte längre är gravid, (se F7).

## 2 Mitt resultat är Inte Gravid. Vad betyder det?

Du kanske inte är gravid eller att graviditetshormonet inte är tillräckligt högt för att detekteras ännu. Testa igen om tre dagar. Om detta test ger dig resultatet "Inte gravid" och din menstruation är sen, kontakta din läkare.

## 3 Hur tidigt kan jag testa?

Detta test kan användas från 6 dagar före din uteblivna mens (5 dagar innan du väntar dig din mens). Eftersom hormonnivåerna varierar från kvinna till kvinna och i början av graviditeten kan vara mycket låga kan du vara gravid men ändå få ett negativt resultat. Diagrammet nedan visar procentandelen graviditeter som upptäcktes i labbttestning med urinproven i tidig graviditet:

Dagar före utebliven mens	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Graviditeter upptäckta	>99 %	>99 %	>99 %	>99 %	96 %	79 %

## 4 Hur fungerar Clearblue?

Det detekterar graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin) i urinen. Testkänsligheten är 10 ml u/ml. Det är över 99 % tillförlitligt i laboratorietester från den dag du väntar dig din mens.

## 5 Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

Läs alltid läkemedelstillverkarens anvisningar för eventuella läkemedel du använder innan du gör testet. Läkemedel som innehåller hCG och vissa sälslynta medicinska tillstånd kan orsaka falska positiva resultat. Vid graviditet utanför livmodern eller om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte fullbordades) kan du få missvisande resultat. Om du närmast dig eller befinner dig i klimakteriet kan du få ett falskt gravid-resultat trots att du inte är gravid. Testet bör **INTE** påverkas av hormonbehandlingar som innehåller klomifencitrat och inte heller av vanliga smärtstillande medel, alkohol, antibiotika eller p-piller.

Om du får oväntade resultat bör du rådfråga din läkare/barnmorska.

## 6 Vad händer om jag är osäker på mitt resultat?

Om du ser två blå linjer inom 10 minuter efter testningen är du gravid, det spelar ingen roll hur svaga eller mörka linjerna är.

### "Gravid"-resultat

**Bild A** Detta är mer troligt när du testar innan du väntar dig mens eller då dina hCG-nivåer kan vara relativt låga.

**Bild B** Du kan se detta om du testar omkring den dag du väntar dig mens eftersom hCG-nivåerna kan vara relativt låga.

**Bild C** Du kan se detta om du testar mer än några dagar efter utebliven mens eftersom hCG-nivåerna är högre.

Om du fortfarande är osäker på ditt resultat bör du vänta med att testa igen i minst 3 dagar och se till att följa bruksanvisningen

## 7 Jag fick tidigare resultatet "Gravid" men sedan testade jag igen och fick ett negativt resultat, eller så fick jag min mens. Vad betyder det?

Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda på att du inte längre är gravid. Detta kallas "spontan abort" vilket inte är ovanligt och påverkar cirka 1 av 4 graviditeter. De flesta kvinnor kan få en hälsosam graviditet efteråt.

## 8 Finns det något jag ska göra om jag planerar att bli gravid?

Det är en bra idé att prata med din läkare innan du försöker bli gravid. Många läkare rekommenderar att det kan vara bra att ta folsyra eller vitamintillskott, undvika alkohol, sluta röka och att försöka hålla en hälsosam vikt. Du kanske också vill överväga att använda ett ägglossningstest för att identifiera dina mest fertila dagar. Clearblue erbjuder ett sortiment som hjälper dig att maximera dina chanser att bli gravid.

# ! Testfel

## Den färgändrade spetsen blir inte helt rosa.

Du kanske inte har applicerat tillräckligt med urin. Du kan dock vara säker på att testet har fungerat om kontrolllinjen visas inom 10 minuter efter testningen.

## Ingen blå linje visas i kontrollfönstret inom 10 minuter efter testningen.

Testet har inte fungerat, möjligen för att för mycket eller för lite urin använts. Testa igen med ett nytt test och följ instruktionerna noggrant.

Resultatfönster  
Kontrollfönster



## www.clearblue.com

Produktrådgivning är tillgänglig helgfri måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00. Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.

020 100 507 Samtalet är gratis.

Alla samtal spelas in och kan övervakas i kvalitetssyfte. Vänligen ha produkten och hela förpackningen, inklusive folieomslagen, tillgängliga när du ringer.

Instruktioner för Clearblue Ultratidigt, med "CB14" tryckt på omslaget. För självtestning i hemmet. Endast för *in vitro*-diagnostik. Inte för invarter bruk. Får inte återanvändas. Förvaras oättnadligt för barn. Förvara vid 2-30 °C. Om produkten har förvarats i kylskåp ska du låta den uppnå rumstemperatur i 30 minuter innan du utför testet. Använd inte testet om folieförpackningen är skadad. Använd inte efter utgångsdatumet. Kassera som vanligt hushållsavfall. Demontera inte enheten. Innehåller små delar. Förtär inte någon del av den

här enheten. Om du sväljer någon del av misstag, kontakta läkare. Rapportera eventuellt personskada orsakad av användningen av denna produkt till Clearblue.

179 % av gravid-resultat kan detekteras 6 dagar före din uteblivna mens (5 dagar innan du väntar dig mens).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz.

LOT	Partikod	IVD	Medicinteknisk produkt för <i>in vitro</i> -diagnostik		Tillverkare
	Utgångsdatum		Temperaturgräns 2-30 °C		Får inte återanvändas

Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD.

© 2021 SPD. Alla rättigheter förbehållna.

2300438.05 04-2021

