

Clearblue®

Ultratidigt AVANCERAT
Graviditetstest



För självtestning. Läs bruksanvisningen noga innan du testar.

Den här produkten är en icke-automatiserad självtestningsenhet för hemmabruk för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i en kvinnas urin i syfte att fastställa graviditet. Avsedd att användas från 6 dagar före utebliven mens (5 dagar före väntad mens).

Varningar och försiktighetsåtgärder

Instruktioner för enheter med "CB16002" tryckt på omslaget. För självtestning i hemmet. Endast för in vitro-diagnostik. Inte för invärtes bruk. Får inte återanvändas. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras vid 2–30 °C. Om produkten har förvarats i kylskåp ska den låta den uppnå rumstemperatur i 30 minuter innan du utför testet. Använd inte testet om folieförpackningen är skadad. Använd inte efter utgångsdatumet. När folien har öppnats ska testet användas omedelbart. Kassera som vanligt hushållsavfall. Innehåller små delar. Förtär inte någon del av den här enheten. Kontakta läkare om du av misstag sväljer någon del. Rapportera eventuell personskada orsakad av användningen av denna produkt till Clearblue och den behöriga myndigheten i medlemsstaten.



Testa från
6 dagar
före
utebliven mens*



med
DualSense-
teknik



Drick inte
mycket vätska
innan du gör testet



Om du testar tidigt
ska du använda
dagens första urin
Testa annars när som helst. Se F2

1 Gör testet

Utrustning som behövs men som inte medföljer: Ren och torr behållare och ett tidtagarur.
Ta bort folien, ta av locket och använd omedelbart. Håll uppsugningsspetsen nedåtriktad och placera bara spetsen i **antingen**:

din urinstråle



eller

ett uppsamlat urinprov



VIKTIGT!

Sänk ned
spetsen helt,
som visas på
bilden

Sätt på locket igen och lägg testet på en plan yta.

2 Vänta



Röda linjer börjar framträda. Om inget händer, läs avsnittet "Testfel".

Vänta i 5 HELA MINUTER innan du läser av resultatet.

3 Resultat

Gravid

Se F4 för mer information.




Om du ser två linjer betyder det att du är gravid.
Det har ingen betydelse hur ljusa eller mörka linjerna är.

Det måste synas en röd linje i kontrollfönstret för att resultatet ska vara giltigt. Om inget händer, läs avsnittet "Testfel". **VIKTIGT!** Läs av resultatet inom 10 minuter efter testning. Bortse från eventuella förändringar efter denna tidpunkt.

Inte Gravid

Se F5 för mer information.

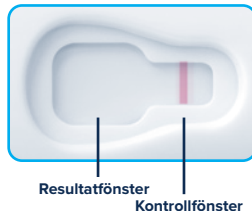

Frågor och svar

1 Hur tillförlitligt är Clearblue?

Ultratidigt AVANCERAT graviditetstest är över 99 % tillförlitligt i laboratorietester från den dag du förväntar din mens.

2 Vilken tid på dagen kan jag testa?

Om du testar innan du ska ha mens ska du alltid använda dagens första urin eftersom alla graviditetshormoner är mer koncentrerade då. Om du testar från den dag du ska ha mens kommer hormonnivåerna att vara högre om du är gravid. Då kan du testa med urin tagen vilken tid som helst under dagen.

3 Hur tidigt kan jag testa?

Detta test kan användas från 6 dagar innan utebliven mens (5 dagar innan förväntad mens).*

Eftersom hormonnivåerna varierar från kvinna till kvinna och kan vara mycket låga i början av graviditeten, kan du dock vara gravid och ändå få ett negativt resultat.

Diagrammet nedan visar andelen graviditeter som upptäckts i labbtестning av tidiga urinprover från gravida kvinnor:

Dagar innan utebliven mens	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Detekterade graviditeter	> 99 %	> 99 %	> 99 %	98 %	93 %	77 %

4 Mitt resultat är Gravid. Vad ska jag göra nu?

Kontakta läkare för råd om vad du ska göra härnäst. Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda på att du inte längre är gravid.

5 Mitt resultat är Inte Gravid. Vad betyder det?

Du kanske inte är gravid, eller så har graviditetshormonet kanske inte tillräckligt hög koncentration för att detekteras ännu.

Om du testade dig tidigt (innan väntad mens) ska du testa igen när det är dags för din mens.

Kontakta din läkare om du får ett negativt gravid-resultat på eller efter den dag du ska ha din mens, men fortfarande tror att du kan vara gravid.

6 Hur fungerar DualSense-tekniken?

Även om hCG är känt som "graviditetshormonet" kan en låg hCG-nivå förekomma i urinen hos ett mycket litet antal kvinnor utan att de är gravida (vanligtvis kvinnor nära eller i klimakteriet). Det innebär att det kan finnas en mycket liten risk att dessa kvinnor får falskt positiva resultat om de använder graviditetstest med hög känslighet, dvs. som kan användas mycket tidigt, eftersom det måste kunna upptäcka låga halter av hCG.

Forskning visar dock att dessa kvinnor också kan ha en hög nivå av det associerade FSH (follikelstimulerande hormon). Clearblues DualSense-teknik är ett unikt system som fångar hCG när det finns höga nivåer av FSH i urinen. Den är utformad för att hjälpa till att undvika risken för falska positiva resultat inom denna grupp av kvinnor.

7 Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

Läs alltid läkemedelstillverkarens anvisningar för eventuella läkemedel du använder innan du gör testet. Om du får oväntade resultat bör du rådfråga din läkare.

Läkemedel som innehåller hCG eller FSH och andra hormonbehandlingar kan påverka resultatet. Vid graviditet utanför livmodern eller om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte fullföljdes) kan du få missvisande resultat.

Testet påverkas normalt INTE av hormonbehandlingar som innehåller klomifencitrat och inte heller av vanliga smärtstillande medel, alkohol, antibiotika eller p-pillar.

8 Finns det något jag bör göra om jag planerar att bli gravid?

Det är en bra idé att prata med din läkare innan du försöker bli gravid. Många läkare rekommenderar att ta folsyra eller vitamintillskott, undvika alkohol, sluta röka och försöka hålla en hälsosam vikt. Du kan också överväga att använda ett ägglossningstest för att identifiera dina mest fertila dagar.

Clearblue erbjuder ett sortiment som hjälper dig att maximera dina chanser att bli gravid.

! Testfel

Det syns ingen röd linje i kontrollfönstret inom 10 minuter efter att du gjorde testet.

Testet har inte fungerat, möjligen för att för mycket eller för lite urin använts. Testa igen med ett nytt test och följ instruktionerna noggrant.



Resultatfönster Kontrollfönster



Prestandaegenskaper

Klinisk prestanda:

Kliniska prestandatester har visat att enheten är > 99 % tillförlitlig när det gäller att fastställa graviditetsstatus från dagen då mens väntas.

- Enheten var > 99 % tillförlitlig när den användes av lekmän, jämfört med deras graviditetsstatus (testades av 302 kvinnor).
- Vid laboratorietestning av 708 prover var enheten > 99 % tillförlitlig från dagen för väntad mens.
- Klinisk specificitetstestning av prover från kvinnor före, under och efter klimakteriet (501 prover) bekräftade ≥ 99 % specificitet

Analytisk prestanda:

Analytisk specificitet fastställdes genom att testa enheten med potentiellt störande eller korsreagerande ämnen. Resultaten bekräftade att höga koncentrationer av dessa inte påverkar enhetens prestanda. Inte heller påverkas den av höga nivåer av hCG-betakärnfragment, mycket höga nivåer av intakt hCG, ett flertal specifika densiteter eller urinens pH. En precisionsstudie har visat att enhetens analytiska känslighet är 10 mIU/ml.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz.

Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD.

© 2025 SPD. Med ensamrätt.

www.clearblue.com

Produktrådgivning är tillgänglig måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00. Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.

020 100 507 Samtalet är gratis.

Alla samtal spelas in och kan övervakas i kvalitetssyfte. Vänligen ha produkten och hela förpackningen, inklusive folieomslagen, tillgängliga när du ringer.

IVD	Medicinsk produkt för in vitro-diagnostik	LOT	Partikod
	Tillverkare		Utgångsdatum
	Får inte återanvändas		Temperaturgräns 2–30 °C
EU REP	Auktoriserad representant i Europeiska unionen		

Litteratur

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnath C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.
3. Gronowski A, et al. Clin Chem 2008; 54: 652-656

*77 % av alla graviditetstestresultat kan detekteras 6 dagar före utebliven mens (5 dagar före väntad mens).

