

Ultratidigt Graviditetstest


Den här produkten är en icke-automatiserad självtestningsenhet för hemmabruk för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i en kvinnas urin i syfte att fastställa graviditet. Avsedd att användas från 6 dagar före utebliven mens (5 dagar före väntad mens).

1 Gör testet

Utrustning som behövs men som inte medföljer: Ren och torr behållare och ett tidtagarur. Ta bort folien, ta av locket och använd omedelbart.

Placera den färgändrande spetsen:

VIKTIGT! Den färgändrande spetsen blir omedelbart rosa, vilket innebär att urin absorberas. Börja tidtagningen så snart du ser att den färgändrande spetsen blir rosa. Sätt på locket igen och lägg teststicken på en plan yta. Se avsnittet "Testfel" om spetsen inte blir helt rosa.

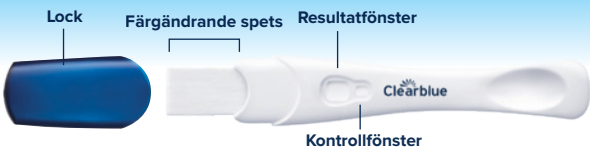

SVENSKA

För självtestning. Läs bruksanvisningen noga innan du testar.

Varningar och försiktighetsåtgärder
Instruktioner för enheten med "CB14005" tryckt på förpackningen. För självtestning i hemmet. Endast för in vitro-diagnostik. Inte för invärtes bruk. Får inte återanvändas. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras vid 2–30 °C. Om produkten har förvarats i kylskåp ska du låta den uppnå rumtemperatur i 30 minuter innan du utför testet. Använd inte testet om folieförpackningen är skadad. Använd inte efter utgångsdatumet. När folien har öppnats ska testet användas omedelbart. Kassera som vanligt hushållsavfall. Innehåller små delar. Förtär inte någon del av den här enheten. Kontakta läkare om du av misstag sväljer någon del. Rapportera eventuell personskada orsakad av användningen av denna produkt till Clearblue och den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

Testa från **6 dagar** före utebliven mens*

Om du testar tidigt ska du använda dagens första urin
Testa annars när som helst

Drick inte mycket vätska innan du testar

Läs av resultatet inom **10 minuter**

2 Vänta

En linje kan börja visas i kontrollfönstret nästan omedelbart men du måste **VÄNTA I 3 HELA MINUTER** innan du läser av ditt resultat. Se avsnittet "Testfel" om inga blå linjer visas.

3 Resultat

Gravid – Kontakta läkare om ditt resultat är Gravid (se F1)

Bild A

Bild B

Bild C

Inte Gravid (se F2)

OM DU SER TVÅ LINJER BETYDER DET ATT DU ÄR GRAVID. DET HAR INGEN BETYDELSE HUR LJUSA ELLER MÖRKA LINJERNA ÄR.

Det måste synas en blå linje i kontrollfönstret för att ditt resultat ska vara giltigt. Se i annat fall avsnittet "Testfel".

VIKTIGT! Läs av ditt resultat inom **10 minuter** efter testning. Bortse från eventuella förändringar efter denna tidpunkt.

? Frågor och svar

- 1 Mitt resultat är Gravid. Vad ska jag göra?** Kontakta läkare för råd om vad du ska göra härnäst. Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda på att du inte längre är gravid (se F7).

2 Mitt resultat är Inte Gravid. Vad betyder det? Du kanske inte är gravid eller graviditetshormonet kanske inte är i tillräckligt hög koncentration för att detekteras ännu. Testa igen om tre dagar. Kontakta läkare om testet ger dig resultatet "Inte Gravid" och din mens är sen.

3 Hur tidigt kan jag testa? Detta test kan användas från 6 dagar innan utebliven mens (5 dagar innan du väntar din mens). Men eftersom hormonnivåerna varierar från kvinna till kvinna och kan vara mycket låga i början av graviditeten, kan du vara gravid men ändå få ett negativt resultat. Diagrammet nedan visar procentandelen graviditeter som detekterades vid labbtestning med urinprover tidigt under graviditeten:

Dagar innan utebliven mens	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Detekterade graviditeter	>99 %	>99 %	>99 %	>99 %	96 %	79 %
- 4 Hur fungerar det här testet?** Det detekterar hCG i urin efter provapplikering. Visuella resultat visar om hCG har detekterats med över 99 % tillförlitlighet från dagen då mens väntas.

5 Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd? Läs alltid läkemedelstillverkarens anvisningar för eventuella läkemedel du använder innan du gör testet. Läkemedel som innehåller hCG och vissa sällsynta medicinska tillstånd kan orsaka falskt positiva resultat. Vid graviditet utanför livmodern eller om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte fullföljdes) kan du få missvisande resultat. Om du närmar dig eller befinner dig i klimakteriet kan du få ett falskt gravid-resultat trots att du inte är gravid. Testet påverkas normalt INTE av hormonbehandlingar som innehåller klomifencitrat och inte heller av vanliga smärtstillande medel, alkohol, antibiotika eller p-piller. Om du får oväntade resultat bör du rådfråga din läkare.
- 6 Vad ska jag göra om jag är osäker på mitt resultat?** Om du ser två blå linjer inom 10 minuter efter testningen är du gravid. Det spelar ingen roll hur svaga eller mörka linjerna är.

Resultatet Gravid

Bild A: Detta är mer troligt när du testar innan du väntar dig mens eftersom dina hCG-nivåer kan vara relativt låga.

Bild B: Du kan se detta om du testar omkring den dag du väntar dig mens eftersom hCG-nivåerna kan vara relativt låga.

Bild C: Du kan se detta om du testar flera dagar efter utebliven mens eftersom hCG-nivåerna är högre.

Om du fortfarande är osäker på ditt resultat bör du vänta med att testa igen i minst 3 dagar och se till att följa bruksanvisningen.

7 Jag fick tidigare resultatet Gravid men sedan testade jag igen och fick ett negativt resultat, eller så fick jag min mens. Vad betyder det? Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda på att du inte längre är gravid. Detta kan bero på spontan abort. Det är inte ovanligt och sker vid cirka 1 av 4 graviditeter. De flesta kvinnor kan gå igenom en hälsosam graviditet efteråt.

8 Finns det något jag bör göra om jag planerar att bli gravid? Det är en bra idé att prata med din läkare innan du försöker bli gravid. Många läkare rekommenderar att ta folsyra eller vitamintillskott, undvika alkohol, sluta röka och försöka hålla en hälsosam vikt. Du kan också överväga att använda ett ägglossningstest för att identifiera dina mest fertila dagar. Clearblue erbjuder ett sortiment som hjälper dig att maximera dina chanser att bli gravid.

! Testfel

Den färgändrande spetsen blir inte helt rosa. Du kanske inte har tillfört tillräckligt med urin. Du kan dock vara säker på att testet har fungerat om kontrolllinjen visas inom 10 minuter efter testningen.

Ingen blå linje visas i kontrollfönstret inom 10 minuter efter testningen. Testet har inte fungerat, möjligen för att för mycket eller för lite urin använts. Testa igen med ett nytt test och följ instruktionerna noggrant.



Prestandaegenskaper
Klinisk prestanda:
Kliniska prestandatesten har visat att enheten är > 99 % tillförlitlig när det gäller att fastställa graviditetsstatus från dagen då mens väntas.

- Enheten var > 99 % tillförlitlig vid användning av lekmän, jämfört med deras graviditetsstatus (testades av 911 kvinnor).
- I en studie där 300 prover testades var enheten > 99 % tillförlitlig från dagen då mens väntas.
- Klinisk specificitetstestning med pre-, peri- och postmenopausala prover (1 051 prover) bekräftade ≥ 99 % specificitet.

Analytisk prestanda:
Analytisk specificitet fastställdes genom att testa enheten med potentiellt störande eller korsreagerande ämnen. Resultaten bekräftade att höga koncentrationer av dessa inte påverkar enhetens prestanda. Inte heller påverkas den av höga nivåer av hCG-betakarfragment, mycket höga nivåer av intakt hCG, ett flertal specifika densiteter eller urinens pH. En precisionsstudie har visat att enhetens analytiska känslighet är 10 mIU/mL.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz.

IVD	Medicinsk produkt för in vitro-diagnostik	LOT	Partikod
	Tillverkare		Utgångsdatum
	Får inte återanvändas		Temperaturgräns 2°C – 30°C
EC REP	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen		

Litteratur
1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.
*79 % av gravid-resultat kan detekteras 6 dagar före utebliven mens (5 dagar före väntad mens).

Clearblue® är ett varumärke som tillhör SPD.
© 2025 SPD. Med ensamrätt.

www.clearblue.com
Produktrådgivning är tillgänglig måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00. Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.
020 100 507 Samtalet är gratis.
Alla samtal spelas in och kan övervakas i kvalitetssyfte. Vänligen ha produkten och hela förpackningen, inklusive folieomslagen, tillgängliga när du ringer.